

Začíname

Krok 1

Zapnite a nechajte pracovať

Silno stlačte stredové tlačidlo a nechajte PRO plávať po svaloch, ktoré si vyžadujú najvyššiu pozornosť. Rýchlosť upravíte stlačením tlačidiel **(+)** a **(-)**. Nevytvárajte príliš silný tlak.

Krok 2

Stiahnite si aplikáciu Theragun

Prevedieme vás bezstarostne nastavením a ukážeme, ako dostať z vášho Theragunu PRO maximum.


Krok 3

Pocíťte ten rozdiel. Každý deň.

Zhlboka sa nadýchnite a poskytnite si ošetrovanie s prednastaveným programom alebo freestyle, všetko je vytvorené priamo pre vás so sprievodcom v aplikácii.

Theragun PRO


- A** OLED displej
- B** Ovládacie tlačidlá
- C** Multi-úchopová rukoväť
- D** Li-ion batéria
- E** Tlačidlo pre odistenie batérie
- F** Tlačidlo pre odistenie polohy ramena
- G** Polohovateľné rameno prístroja
- H** Vymeniteľný nástavec

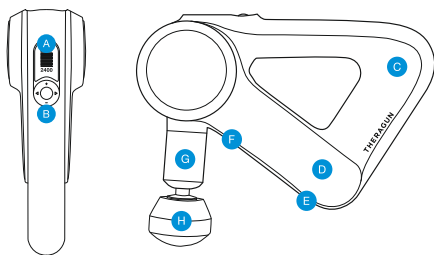

Prečítajte si priložené bezpečnostné inštrukcie.


Použitie Theragunu PRO

1. Pred zapnutím vložte do Theragunu PRO batériu.
2. Silným stlačením stredového tlačidla zapnete prístroj Theragun PRO.
3. Pre zvýšenie či zníženie rýchlosti ošetrovania použite tlačidlá **(+)** a **(-)**. (rozmedzie 1750 - 2400 ot./min.).
4. Pre prepínanie medzi prednastavenými programami prístroja Theragun PRO použite tlačidlá **(<)** a **(>)**.
5. Prístroj vypnete silným stlačením a podržaním stredového tlačidla. Tlačidlo nechajte stlačené kým sa Theragun PRO nevypne.

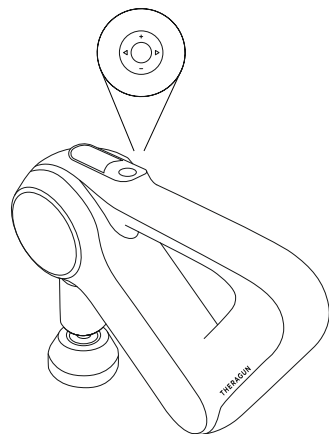


Nasadenie a zloženie nástavca

Nasmerujte nástavec tak, aby korešpondoval tvar koncovky ramena s tvarom priehlbiny v nástavci, nasadte zatlačením, diely do seba zacvaknú. Zloženie nástavca – uchopte spodnú časť nástavca a vytiahnite (viď. obrázok).

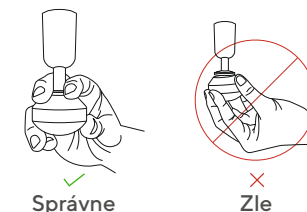

Použitie polohovacieho ramena

Theragun PRO umožňuje nastavenie 4 polôh ramena. Pre úpravu polohy stlačte tlačidlo na spodnej strane prístroja a obráťte rameno do požadovanej polohy.

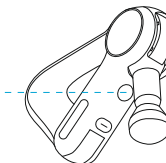

Nástavce

Váš Theragun PRO prichádza so 6 nástavcami. Každý je špeciálne navrhnutý na iné svalové skupiny a spôsoby použitia.



Li-ion batérie

Pripravte si batériu k otvoru na spodnej strane prístroja, plochou časťou zakončenej batérie smerom k okrúhlemu tlačidlu. Zasuňte batériu do prístroja.

Zostávajúca výdrž batérie sa pri zapnutí prístroja zobrazí na OLED displeji.

Pre vybratie batérie stlačte okrúhle tlačidlo pri otvore a batériu vytiahnite.

Nabíjačka

Zapojte kábel do zásuvky na nabíjačke. Vložte batériu do nabíjacej stanice a zatlačte. Signalizácia na nabíjacej stanici začne blikať. Batérie je nabitá, keď signalizácia svieti bez prerušenia.

U prístroja Theragun PRO je možnosť bezdrôtového nabíjania.
Pre viac informácií navštívte www.rehasport.sk

Smart vlastnosti

Theragun PRO je Smart zariadenie, ktoré umožňuje pripojenie cez Bluetooth. Vďaka tomu sa jednoducho pripojí s aplikáciou Therabody. Aplikácia vás prevedie každou procedúrou krok za krokom a ukáže vám, ako spárovať aplikáciu s vašim PRO.

Akonáhle máte prístroj spárovaný, môžete pomocou telefónu upraviť rýchlosť, aktivovať prednastavené programy ošetrovania a na základe vášho používania dostanete odporúčanie šité na mieru. OLED displej je doplnok aplikácie a pomocník pri ošetrovaní so sprievodcom. Zobrazuje aktuálnu rýchlosť a silu.



Naskenujte QR kód a začnite.

