

## Začíname

### Krok 1

#### Zapnite a nechajte pracovať

Silno stlačte stredové tlačidlo a nechajte Prime plávať po svaloch, ktoré si vyžadujú najvyššiu pozornosť. Rýchlosť upravíte stlačením šípok (**▲**) a (**▼**). Nevytvárajte príliš silný tlak.

### Krok 2

#### Stiahnite si aplikáciu Theragun

Prevedieme vás bezstarostne nastavením a ukážeme, ako dostať z vášho Theragunu Prime maximum.


### Krok 3

#### Pocíťte ten rozdiel. Každý deň.

Zhlboka sa nadýchnite a poskytnite si ošetrovanie s prednastaveným programom alebo freestyle, všetko je vytvorené priamo pre vás so sprievodcom v aplikácii.

## Theragun Prime


- A** LED indikátor batérie
- B** LED indikátor rýchlosti
- C** Ovládacie tlačidlá
- D** Multi-úchopová rukoväť
- E** Port na pripojenie nabíjačky
- F** Vymeniteľný nástavec

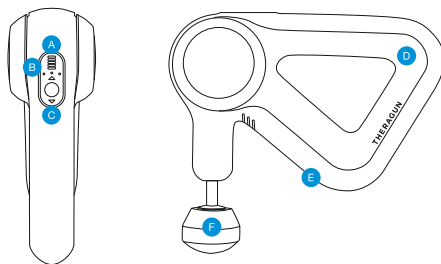

Prečítajte si priložené bezpečnostné inštrukcie.


## Použitie Theragunu Prime

1. Silným stlačením stredového tlačidla zapnete prístroj Theragun Prime.
2. Pre prepínanie medzi 5 prednastavenými rýchlosťami použijete šípky (**▲**) a (**▼**).
3. Prístroj vypnete silným stlačením a podržaním stredového tlačidla.

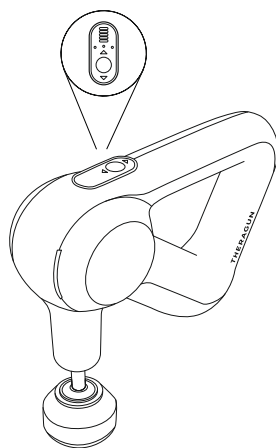


## Nasadenie a zloženie nástavca

Nasmerujte nástavec tak, aby korešpondoval tvar koncovky ramena s tvarom priehlbiny v nástavci, nasadte zatlačením, diely do seba zacvaknú. Zloženie nástavca – uchopte spodnú časť nástavca a vytiahnite (viď. obrázok).

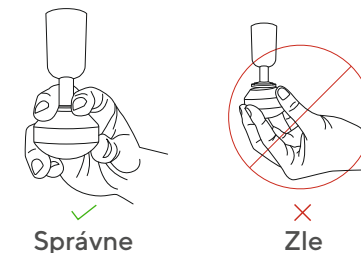


## Nástavce

Váš Theragun Prime prichádza so 4 nástavcami. Každý je špeciálne navrhnutý na iné svalové skupiny a spôsoby použitia.

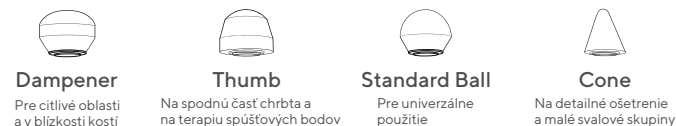

## Nabíjanie Theragunu Prime


1. Vypnite prístroj Theragun Prime a pripojte nabíjačku do portu na spodnej strane prístroja.
2. LED indikátor batérie začne blikať. Indikátor je umiestnený pod svetelnou stupnicou 5 rýchlostí.
3. Nabíjanie je dokončené, keď svietia neperušovane všetky 3 LED indikátory stavu batérie.

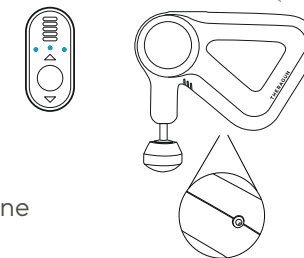

## Smart vlastnosti

Theragun Prime je Smart zariadenie, ktoré umožňuje pripojenie cez Bluetooth. Vďaka tomu sa jednoducho prepája s aplikáciou Therabody. Aplikácia vás prevedie každou procedúrou krok za krokom a ukáže vám, ako spárovať aplikáciu s vašim Prime.

Akonáhle máte prístroj spárovaný, môžete pomocou telefónu upraviť rýchlosť, aktivovať prednastavené programy ošetrovania a na základe vášho používania dostanete odporúčanie šité na mieru. OLED displej je doplnok aplikácie a pomocník pri ošetrovaní so sprievodcom. Zobrazuje aktuálnu rýchlosť a silu.

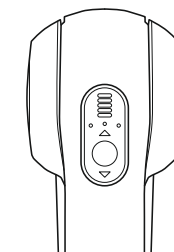

Naskenujte QR kód a začnete.