


Prečítajte si priložené bezpečnostné inštrukcie.

## Wave Roller™

Smart Vibračný Masážny Valec od tvorcov Theragunu.

- A** Tlačidlo pre úpravu rýchlosti ošetrenia
- B** LED kontrolka stavu batérie
- C** LED indikátor rýchlosti
- D** Konektor pripojenia nabíjačky

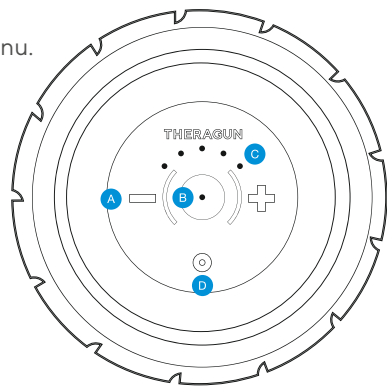

## Použitie Wave Rolleru™

- Wave Roller zapnete silným stlačením a podržaním tlačidla po dobu 1-2 sekúnd
- Wave Roller sa spustí na najnižšiu z piatich rýchlostí. Rýchlosť zvýšite krátkym stlačením tlačidla **+** až do požadovanej rýchlosti.
- Umiestnite valec pod ošetrovanú oblasť, postupne vyvíjajte jemný až stredný tlak podľa potreby.
- Vypnite Wave Roller silným stlačením tlačidla, držte stlačené kým sa valec nevypne.

## Smart vlastnosti

Váš Wave Roller je zariadenie so smart technológiou umožňujúcou pripojenie cez Bluetooth, vytvorenou k jednoduchému prepojeniu s aplikáciou Therabody. Aplikácia Vás prevedie párovaním krok za krokom.



Naskenujte QR kód a začnite.



## Nabíjania Wave Rolleru™

- Vypnite valec a pripojte nabíjačku.
- LED kontrolka stavu batérie bliká, kým nie je batéria plnšie nabitá.
- Nabíjanie je dokončené akonáhle LED indikátor batérie svieti na zeleno.
- Stav batérie je u zapnutého valca zobrazený LED kontrolkou. Ak chcete zobrazit stav batérie vypnutého valca, stlačte krátko tlačidlo pre zapnutie a LED kontrolka ukáže stav batérie.

Úroveň batérie sa na valci zobrazuje nasledujúcimi farbami:

- **Blikajúca červená:** Nízko nabitá
- **Blikajúca modrá:** Do polovice nabitá
- **Blikajúca zelená:** Vysoko nabitá
- **Nepreerušovaná zelená:** Plne nabitá

# THERAGUN

## Wave Roller

### NÁVOD NA POUŽITIE



Výrobca: Theragun, LLC, USA

Vibračná terapia, masážny prístroj

Kód produktu: WAVEROLLER-PKG-EU

Balenie:

Wave Roller, cestovný vak deluxe, nabíjačka

### Špecifikácia

- 5 voliteľných rýchlostí pre prispôsobenie ošetrenia
- Smart vibračný masážny valec s Bluetooth pripojením
- Nepretržitá prevádzka batérie 3 hodiny
- Povrch z hypoalergénnej EVA peny
- Možnosť bezkáblového nabíjania
- Hmotnosť: 1,5 kg
- Rozmery: 30 cm x 13 cm
- Záruka: 2 roky
- Dostupný doplnkový sortiment: Multi-prístrojová bezdrôtová nabíjačka

### ULOŽTE VŠETKY POKYNY PRE NESKORŠIE NAHLIADNUTIE.

Pre viac informácií o produktoch značky Theragun navštívte: [www.rehasport.sk/znacka/theragun-2](http://www.rehasport.sk/znacka/theragun-2).

Pre viac informácií o praktickom využití si stiahnite [Therabody App](#) na App Store alebo Google Play.



Distributor: REHASPORT TRADE s.r.o.  
www.rehasport.cz, tel: 800 200 900



Wave Roller je dôkladne konštruovaný tak, aby poskytol najsilnejšie a najefektívnejšie uvoľnenie, či už ste v pohodlí domova alebo v posilňovni. Tento inteligentný vibračný masážny valec je pripojiteľný cez Bluetooth a ponúka možnosť voľby z 5 stupňov intenzity, ktoré Vám umožnia prispôsobiť ošetrovanie ako na rozohriatie, tak na regeneráciu podľa Vašich potrieb a pohodlne prostredníctvom mobilnej aplikácie Therabody.

## VAROVANIE

Nepoužívajte prístroj na hlave alebo v blízkosti vašich genitálií. Nepoužívajte v oblasti brucha a pásu u tehotných žien. Nepoužívajte Theragun cez ohryzok alebo krčný stavec C4. Nevystavujte Wave Roller a nabíjačku priamemu kontaktu s vodou. Čistite ho čistiacou hubkou alebo ľahko navlhčenou handričkou. Nerozoberajte. Neskladujte Wave Roller alebo nabíjačku tam, kde môžu teploty prekračovať 40°C. Nabíjajte pri teplote 0-40°C. Nevystavujte Wave Roller ani jeho nabíjačku vode. Tento produkt nie je určený pre diagnostikovanie a liečenie.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

PRED PRVÝM POUŽITÍM ALEBO NABITÍM Wave Rolleru SI, PROSÍM, PREČÍTAJTE, VŠETKY NÁVODY A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY V TOMTO MANUÁLI.

### PRED PRVÝM POUŽITÍM SA MUSÍ WAVE ROLLER NABIŤ.

Wave Roller je určený ku komerčnému aj domácejmu použitiu. Snažíme sa, aby bol Wave Roller čo najbezpečnejší. Jedná sa však o moderné mechanické zariadenia s elektrickými súčiastkami. Ak nie je Wave Roller alebo jeho časti používané podľa návodu, hrozí nebezpečenstvo poranenia, elektrického výboja až riziko požiaru. Pri používaní je vždy nutné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenie, a to:

**1. POUŽÍVAJTE LEN PODĽA NÁVODU.** Používajte Wave Roller iba tak, ako je napísané v tomto prevádzkovom manuáli. Používajte len s doporučeným príslušenstvom. Neprevádzajte žiadnu inú údržbu, ktorá nie je uvedená v tomto prevádzkovom manuáli alebo stanovené spoločnosťou Therabody.

**2. NEVHODNÉ PRE DETI.** Wave Roller ani príslušenstvo nie sú určené pre použitie malými deťmi alebo osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo osobami s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie je jeho používanie pod vedením a dohľadom zodpovednej osoby, ktorá zaisťuje bezpečné nabíjanie a používanie. Nedovoľte, aby bol prístroj používaný ako hračka. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, pokiaľ prístroj používate v prítomnosti detí, alebo keď ho deti používajú. Deti by mali byť pod dohľadom, aby ste sa uistili, že sa nebudú hrať s Wave Rollerom a príslušenstvom.

**3. UPOZORNENIE: ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO ZRANENIA, NABÍJAJTE LEN NABÍJAČKOU URČENOU PRE WAVE ROLLER.** Iné typy nabíjačiek môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie. Nepripájajte do napájacej zástrčky alebo zapalovača cigariet. Batérie sa môžu trvale zničiť alebo poškodiť. K bezdrôtovému nabíjaniu používajte iba nabíjačku určenú pre Wave Roller. 1

**4. NABÍJANIA.** Wave Roller by mal byť nabíjaný pod strechou v dobre vetranom a suchom prostredí. Nenabíjajte vonku, v kúpeľni alebo do vzdialenosti 3 metrov od vane alebo bazénu. Nepoužívajte Wave Roller alebo nabíjačku na mokrom povrchu a nevystavujte vlhkosti, dažďu ani snehu. Nepoužívajte v prítomnosti výbušného prostredia, pretože môže vytvoriť iskry, ktoré by mohli spôsobiť požiar.

**5. UKONČENIE NABÍJANIA.** Po ukončení nabíjania vyťahujte nabíjačku zo zástrčky, nikdy nie za kábel, aby ste znížili riziko poškodenia elektrickej zástrčky a kábla. Nikdy neprenášajte nabíjačku pomocou kábla. Chráňte kábel pred teplom, olejom a ostrými hranami. Nepoužívajte a nenabíjajte, keď je kábel poškodený. Neroztahujte kábel nabíjačky a nevystavujte ju tlaku. Umiestňujte kábel mimo vyhrievanej plochy. Nemanipulujte s nabíjačkou, vrátane koncovky nabíjačky alebo s prístrojom pokiaľ máte vlhké ruky. Nabíjajte iba AC Adaptérom: EA1046SAR alebo multi-prístrojovou nabíjačkou Theragun.

**6. NABÍJAČKU VYTIAHNITE,** pokiaľ ju nepoužívate. Odpojte nabíjačku zo zástrčky, pokiaľ ju dlhšiu dobu nepoužívate. Uistite sa, že kábel nabíjačky je umiestnený tak, aby sa nepohol, nezapadol ani nebol vystavený poškodeniu alebo tlaku. Poškodenú nabíjačku okamžite vymeňte.

**7. NEPREBÍJAJTE BATÉRIU.** Nenechávajte Wave Roller v nabíjačke dlhšie než hodinu po úplnom nabití. Nadmerné nabitie zariadenia môže časom znížiť životnosť batérie.

**8. NIKDY NEZAPALUJTE Wave Roller.** Vstavaná batéria môže explodovať a spôsobiť zranenie alebo poškodenie. Pri spálení akumulátoru vznikajú toxické výpary a látky.

**9. NESTLÁČAJTE, NEHÁDŽTE ALEBO NENIČTE.** Nepoužívajte prístroj alebo nabíjačku, ktorá bola vystavená prudkému úderu, spadla, bola prejedaná alebo bola inak poškodená.

**10. CHEMIKÁLIE Z BATÉRIE SPÔSOBUJÚ VÁŽNE POPÁLENINY.** Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou, očami alebo ústami. Pokiaľ z poškodenej batérie vytekajú chemikálie, použite k manipulácii s ňou gumové alebo neoprénové rukavice. Pokiaľ je pokožka vystavená tekutinám z batérie, umyte ju mydlom, vodou a opláchnite octom. Pokiaľ sú batériovým chemikáliám vystavené oči, okamžite ich vypláchnite vodou počas doby 20 minút a vyhľadajte lekársku pomoc. Kontaminovaný odev odstráňte a zlikvidujte ho.

**11. NEPRACUJTE S PRÍSTROJOM** pod prikrývkou alebo vankúšov. Môže spôsobiť elektrický výboj, poranenie alebo požiar.

**12. USKLADNENIE.** Uložte na chladnom, suchom mieste pri teplote 0-40°C. Neskladujte prístroj alebo nabíjačku tam, kde môžu teploty prekračovať 40°C – na priamom slnku, v aute, v železných budovách v lete.

**13. LIKVIDÁCIA.** Vstavané Li-ion batérie sú šetrnejšie k životnému prostrediu ako iné typy batérií. Likvidujte vždy podľa platných predpisov a reguláciou Ministerstva životného prostredia a na miestach na to určených. Dokonca aj vybitý prístroj obsahuje určitú energiu. Pred likvidáciou použite elektrickú pásku k zakrytiu konektorov, aby nedošlo ku skratu batérie, čo by mohlo spôsobiť požiar alebo výbuch.

**14. NEROZOBERAJTE.** Demontáž alebo nesprávne opätovné zostavenie môže viesť k nebezpečeniu úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vystaveniu chemikáliám v batériách. Záruka je neplatná, pokiaľ bol prístroj rozobraný, rovnako ako jeho nabíjačka alebo z nej boli odstránené niektoré súčasti. Pokiaľ je prístroj poškodený, rovnako ako jeho súčasti, kontaktujte spoločnosť Rehasport Trade s.r.o.

**15. SERVIS.** Pokiaľ Wave Roller alebo nabíjačka nepracujú správne, pokiaľ došlo k ostrému nárazu alebo k pádu, poškodeniu, ponechaniu vonku alebo pádu do vody, prístroj a príslušenstvo nepoužívajte a kontaktujte spoločnosť Rehasport Trade s.r.o. zaslaním e-mailu na info@rehasport.cz ohľadne opravy alebo servisu. Prístroj sa nepokúšajte opraviť alebo demontovať, pretože môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

**16. NEPOUŽÍVAJTE POČAS KÚPANIA ALEBO SPRCHOVANIA.** Neumiestňujte ani neskladujte Wave Roller kde by mohol spadnúť alebo sklznúť do vane alebo umývadla. Nevkladajte a nenechajte spadnúť do vody alebo inej tekutiny. Nesiahajte po prístroji, ktorý spadol do vody. Okamžite odpojte zo zdroja energie.

**17. TEPELNÝ OBMEDZOVAČ.** Wave Roller používa automatický resetovací obmedzovač teploty, ktorý vypne zariadenie, aby sa zabránilo prehriatiu a požiaru.

## OBMEDZENÁ ZÁRUKA:

Theragun Wave Roller má obmedzenú záruku na dva roky. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie, za ktoré sa považujú aj opravy prevedené inou osobou než oprávneným pracovníkom spoločnosti Theragun, ďalej sa záruka nevzťahuje na nesprávne použitie, nevhodné použitie, bežné opotrebovanie, nedostatočnú údržbu alebo nehodu. Podrobné informácie o záruke nájdete na [www.theragun.com/warranty](http://www.theragun.com/warranty). V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa záruky kontaktujte, prosím, e-mailom na [info@theragun.com](mailto:info@theragun.com) či [info@rehasport.cz](mailto:info@rehasport.cz).